

PHACO Lutein™

Colorante intraocular para la tinción de la capsula anterior

LUTEÍNA SOLUBLE 1%

+ Azul Tripán 0,04%




Vitreo)care®
by alfa instruments
MEDICENTUR
— AVI —

PHACO Lutein™

Colorante intraocular para la tinción de la capsula anterior

PHACO LUTEIN™
PROPORCIONA UNA
TINCIÓN ÓPTIMA DE
LA CÁPSULA
ANTERIOR EN LA
CIRUGÍA DE CATARATA

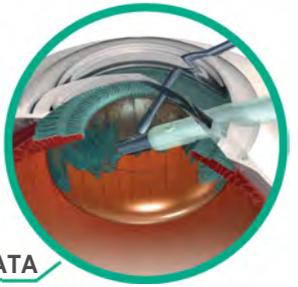

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PHACO Lutein™ JERINGA DE CRISTAL ESTÉRIL 0,5 ML 5 UNIDADES POR CAJA

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 0,5ml contiene: Luteína soluble 1%, Azul Tripán 0,04%. Vehículo biológicamente compatible inactivo.

SEGURIDAD

La Luteína es un compuesto 100% natural y está clasificado por la FDA como GRAS.

EFICACIA

PHACO LUTEIN™ es una alternativa eficaz a los productos que contienen niveles más altos de tintes sintéticos.

PROTECCIÓN

Los estudios clínicos, demostraron que los colorantes intraoculares a base de Luteína desempeñan un papel protector durante la cirugía.

ALTA INYECTABILIDAD

PHACO LUTEIN™ puede ser inyectado fácilmente, incluso con cánulas de 27G, evitar cánulas con punta de silicona.

READY TO USE



Crear espacio dentro de la jeringa, empujando el émbolo hacia atrás.



Agitar enérgicamente durante 5 segundos, inmediatamente antes de la inyección.